

Contour plus link 24

Sistema de monitoramento da glicose sanguínea sem fio

Use somente tiras de teste de glicemia CONTOUR®PLUS

JÁ CODIFICADO


Segunda-Chance de teste

ASCENSIA Diabetes Care

Medtronic

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA

Medidor

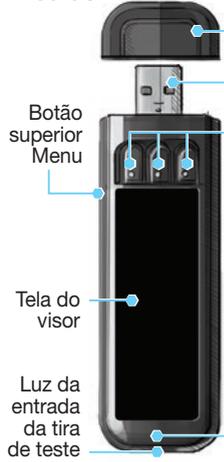

Bomba



NOTA: Verificar as unidades de medida de seu medidor. Consulte o Manual do Usuário de seu medidor para instruções completas.

90001417 Rev. 04/18

Configuração inicial do medidor e conexão com a bomba de insulina MiniMed™ 640G

Como carregar o medidor

- 1 Retire a tampa do conector USB para expor o conector.



Seu medidor CONTOUR®PLUS LINK 2.4 tem uma bateria permanente recarregável.


Carregue o medidor com o carregador de parede* ou ligando o conector USB ao computador. Certifique-se de que o computador está ligado.

O medidor mostrará rapidamente a mensagem “Não testar-Carregando” e a luz da entrada da tira de teste piscará. **Você não pode fazer o teste de glicemia enquanto a bateria estiver sendo carregada.**

Quando o carregamento terminar, a luz da entrada da tira de teste apagará. Desconecte o medidor CONTOUR PLUS LINK 2.4 para realizar o teste.

Desconecte o Medidor do carregador antes de iniciar a Configuração

- 2 Para começar a configuração, mantenha o botão superior Menu pressionado por alguns segundos, até que o medidor ligue.

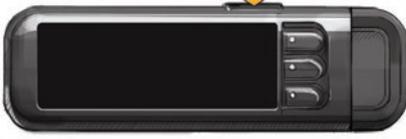

- 3 Role para baixo para selecionar seu idioma. Pressione OK.




- 4 Pressione OK se o idioma correto for mostrado. Pressione NO (Não) se o idioma errado for mostrado.

Ligar à bomba

- 5 Ligar a uma Bomba de Insulina MiniMed? Pressione OK.



- 6 Pressione OK.

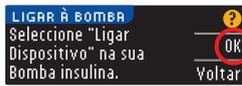


- 7 Deixe o medidor de lado e pegue a bomba. Pressione qualquer botão para ligar a tela e depois pressione o botão Menu. Use a seta para baixo para rolar até Utilitários. Pressione o botão Seleccionar.




Se a tela da bomba ficar em branco, pressione qualquer botão para ligá-la novamente.


- 8 No menu Utilitários, use a seta para baixo para rolar até Opções do dispositivo. Pressione o botão Seleccionar.

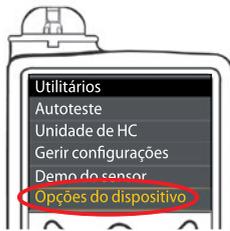


- 9 No menu Opções do dispositivo, role até Ligar dispositivo. Pressione o botão Seleccionar.

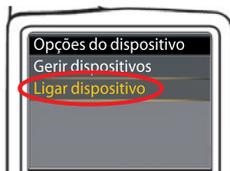

- 10 Coloque o medidor perto da bomba. Selecione Ligação automática na bomba.

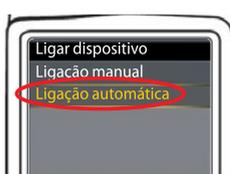

Selecione Ligar automat. no medidor.

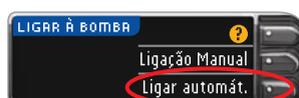

- 11 Leia a tela da bomba, usando a seta para baixo para rolar para a próxima página.

Use os botões de seta para rolar até Continuar.


Pressione o botão Seleccionar.



- 12 Coloque o medidor perto da bomba. Selecione Procurar na bomba.

Selecione Procurar no medidor.

A procura pode levar até 2 minutos.

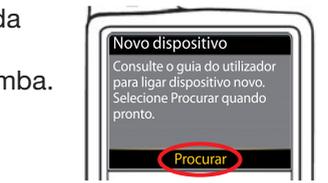

- 13 Verifique se o NS do dispositivo (número de série) na bomba corresponde ao NS do dispositivo no medidor.

Se forem iguais, role até Confirmar, na bomba.

Pressione o botão Seleccionar.




Quando a bomba estiver ligada ao medidor, o NS da tela do medidor mudará para outro número de série. Esse número é o NS da bomba.


- 14 Vire a bomba. Verifique se o NS na parte de trás da bomba corresponde ao número de série da bomba que está sendo mostrado na tela do medidor. Pressione o botão Seguinte.




- 15 Selecione Sempre e pressione OK na próxima tela.

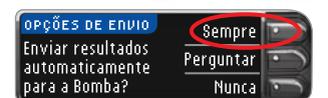

- 16 Selecione o Formato de Data.

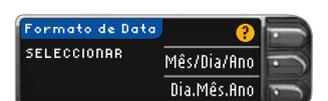


- 17 Pressione OK. Nota: Se a hora e a data estiverem incorretas, você deve alterá-las na bomba.

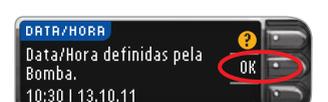

- 18 Pressione Aceitar para selecionar AutoLog desligado.

O AutoLog permite que você marque um resultado do teste como Jejum, Antes de comer (antes da refeição), ou Após comer (após a refeição). Consulte o Manual do Usuário para saber mais.

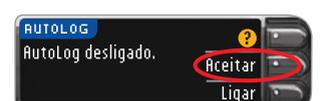


*O carregador de parede pode não estar incluído em todos os kits do medidor. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor para informações sobre a obtenção do carregador de parede.

Vire a página para concluir a configuração. ➡

19 Aceitar ou Alterar Alertas Altos e Baixos.

O medidor chama sua atenção com um alarme sonoro quando sua glicemia está acima ou abaixo dos níveis determinados.

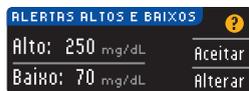

20 Aceitar ou Alterar seu Máximo e mínimo da meta.

O Máximo e mínimo da meta é seu objetivo para os resultados do teste de glicemia.



NOTA: Os alertas só podem ser definidos fora do Máximo e mínimo da(s) meta(s) selecionada(s) para você. As Metas só podem ser definidas dentro dos níveis de Alerta selecionados para você. Para obter mais informações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Ver as informações de contato do Serviço de Atendimento ao Consumidor abaixo.

21 A configuração de seu sistema foi concluída e ele está pronto para realizar o teste de glicemia. Vá para o passo 1 abaixo.

Conf. completa. Introduza tira para realizar um teste.

Materiais para o Teste



Tira de teste CONTOUR®PLUS



Lancetador



Lanceta



Medidor de glicemia CONTOUR®PLUS LINK 2.4

⚠️ ADVERTÊNCIA:


- O lancetador destina-se a autoteste por um único paciente. Não deve ser usado em mais de uma pessoa devido ao risco de infecção.^{1,2}
- Utilize uma nova lanceta a cada teste, já que a lanceta não será mais estéril após o uso.
- Todas as peças deste kit são consideradas de risco biológico e, potencialmente, podem transmitir doenças infecciosas, mesmo depois de você ter feito sua limpeza.
- Sempre lave bem as mãos com água e sabão e seque-as bem antes e depois do teste, da manipulação do medidor, do lancetador ou das tiras de teste.

Para instruções completas sobre a limpeza do medidor, consulte o manual do usuário do medidor.


Como testar seu sangue

Obtenha uma gota de sangue

1 Insira a tira de teste e espere a mensagem **APLICAR GOTAS DE SANGUE**.

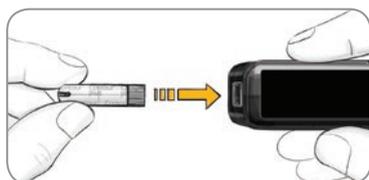


2 Retire a tampa do lancetador. Insira a lanceta firmemente no lancetador até que pare por completo.

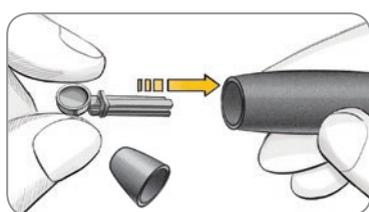


As imagens do lancetador são apenas para fins de ilustração. Seu lancetador pode ser diferente. Consulte as instruções de uso do seu lancetador para instruções detalhadas sobre a preparação do lancetador.

3 Recoloque a tampa. Gire o botão de ajuste da tampa para ajustar a profundidade da punção.

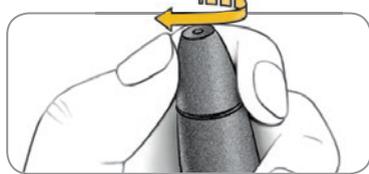

4 Obtenha a gota de sangue.

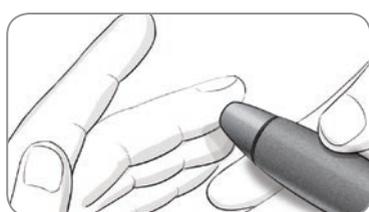

Como testar a gota de sangue

5 Toque a ponta da tira de teste na gota de sangue. Se a primeira gota de sangue não for suficiente, o medidor soará duas vezes o alarme e exibirá a mensagem **TIRA COM GOTAS INSUFICIENTE**. Você terá cerca de 30 segundos para aplicar mais sangue à mesma tira.



NOTA: Se **AutoLog** estiver **LIGADO**, você deverá marcar o resultado como **Jejum**, **Antes comer (antes da refeição)** ou **Após comer (após a refeição)** para que o resultado seja exibido. Se seu resultado estiver acima do valor definido para seu Alerta Alto ou abaixo do valor definido para seu Alerta Baixo, você verá o resultado sem ter que selecionar o **AutoLog**.

Referências

- 1 US Food and Drug Administration. Use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens: initial communication. US Department of Health and Human Services; update 11/29/2010. <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>
- 2 Centers for Disease Control and Prevention. CDC clinical reminder: use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens. US Department of Health and Human Services; 8/23/2010. <http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html>

Como enviar os resultados para sua bomba MiniMed

6 Se **Sempre** tiver sido selecionado nas **Opções de envio** durante a **Configuração**, os resultados serão enviados diretamente para a bomba. Se **Perguntar** tiver sido selecionado nas **Opções de envio** durante a **Configuração**, você poderá escolher entre enviar ou não o resultado para a bomba depois de cada teste de glicemia.



Pressione **Enviar** OU **Não enviar**.

CUIDADO: Verifique sempre a tela da bomba para assegurar que o resultado da glicose mostrado está de acordo com o resultado da glicose mostrado no medidor.

Bolus, Lembrete e Notas

7 Selecione **Bolus** para enviar um bolus para a bomba. Selecione **Lembrete** para criar um lembrete para o próximo teste. Selecione **Notas** para adicionar mais informações ao resultado.



Confirme que o resultado foi enviado para a bomba

8 Pegue a bomba. Mantenha pressionado o botão **Voltar** para ir para a tela inicial. O resultado de sua glicemia deve aparecer na tela da bomba.



Desligue o medidor

9 Retire a tira de teste e o medidor se desligará em 3 minutos. Ou mantenha o botão **Menu** pressionado para desligar o medidor.



Consulte o manual do usuário de seu CONTOUR PLUS LINK 2.4, as instruções de uso do lancetador e o manual do usuário da bomba de insulina MiniMed para instruções completas.

Consulte o horário de Apoio ao Cliente em www.diabetes.ascensia.com

Para obter informações sobre patentes e licenças relacionadas, consulte www.patents.ascensia.com

IVD Para uso em diagnóstico in vitro



Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

Importado e Distribuído por:

Nutriport Comercial Ltda
Rua Prof. Serafim Orlandi, 356
São Paulo - SP - Brasil



ASCENSIA
Diabetes Care

CEP: 04115-090
CNPJ: 03.612.312/0001-44
SAC: 0800-878-7810
Registro ANVISA nº: 80190770001
Resp. Técnica: Fernanda Soares Makuda
CRF-SP: 81203

Todas as marcas comerciais são propriedades de seus respectivos proprietários.

Medtronic

© 2018 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Todos os direitos reservados.